

# SARS-COV-2 ANTIGEN-SCHNELLTEST

So einfach schützen  
Sie sich und Ihre  
Mitarbeiter.

- Einfach.
- Preiswert.
- Sicher.

Lepu Antigen Schnelltest  
SARS-CoV-2

BfArM Test ID: AT052/20

**Höchste Testqualität:**

Sensitivität: 92,0 % (positive Testung)

Spezifität: 99,26 % (negative Testung)


- › Der Antigen-Test triagiert zuverlässig und schnell Menschen mit Verdacht auf SARS-CoV-2.
- › Die Ergebnisse liegen innerhalb von 15 Minuten vor und ermöglichen so eine schnelle Identifikation von Infizierten.
- › Einfache Handhabung ohne zusätzliches Analysesystem
- › Entnahme des Probenmaterials erfolgt durch Nasenabstrich.
- › Jetzt als Laientest zugelassen!

**Verpackungseinheit:** 25 Testkarten = 1 Packung



ab  
**€ 5,95**  
pro Test

Paul-Ehrlich-Institut  
evaluiert ✓

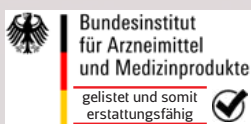

**NL** NIEMANN-LAES  
INDUSTRIEBEDARF

## Vorteile des Schnelltests

- › Erhebliche Zeitersparnis. (Wegfall der Probenvorbereitung.)
- › Erkennt auch die Mutationen durch N-Nucleocapsid Protein.
- › Einfachste Bedienung in nur 4 Schritten.
- › Senkung des Infektionsrisikos. (Abstrich Tupfer verbleibt in Karte.)
- › Erhöhung der Sicherheit. (Keine Verwechslungsgefahr der Proben.)
- › Probenabnahme in vorderen Nasenöffnungen.
- › Höhere Testsicherheit gegenüber Saliva Tests. (Speichel)
- › „Kinderleicht“ zu bedienen.



## Merkmale

Gelistet beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) deren Schnelltests im Rahmen der Nationalen Teststrategie des Bundes erstattet werden.

- › Schnelles Ergebnis nach 15 Minuten.
- › Evaluiert vom Paul-Ehrlich-Institut (PEI).
- › Einfache Handhabung, keine zusätzlichen Materialien notwendig.

Der Antigen-Test triagiert zuverlässig und schnell Menschen mit Verdacht auf SARS-CoV-2. Die Ergebnisse des Antigen Schnelltests liegen innerhalb von 15 Minuten vor und ermöglichen so eine schnelle Identifikation von Infizierten.

Mit diesem Test kann ein genaues Screening von Personen mit bekanntem Kontakt zu SARS-CoV-2-Infizierten durchgeführt werden und er liefert schnelle Antworten hinsichtlich des Infektionsstatus.

## Produktinformationen

Das SARS-CoV-2 Antigen Test Kit enthält alle benötigten Materialien und kann ortsunabhängig verwendet werden.

### Im Antigen Schnelltest Kit enthalten:

- › Schnelltest-Karten (25 Stück / Packung)
- › Steriler Abstrichtupfer 25 Stück
- › Extraktionspuffer 25 Ampullen
- › Gebrauchsanweisung

Lagerbedingung: 4 - 30 °C


Haltbarkeit: 12 Monate

**Aktenzeichen der Sonderzulassung  
des BfArM: 5640-S-104/21**




# Anleitung in nur 4 Schritten

1.

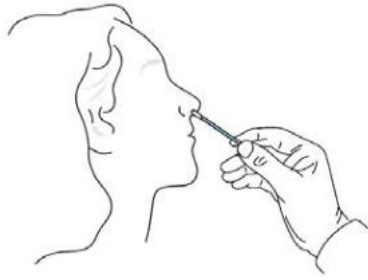


Führen Sie den Tupfer ca. 3 cm in beide Nasenlöcher, drehen ihn jeweils 5 mal, um die Probe zu entnehmen.

2.

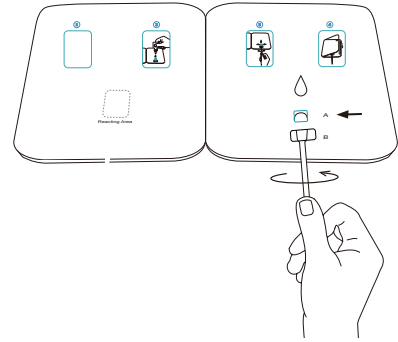


Führen Sie die Probe durch Vertiefung B bis Vertiefung A. Drehen Sie den Stab zuerst zweimal im Uhrzeigersinn und dann zweimal gegen den Uhrzeigersinn.

3.

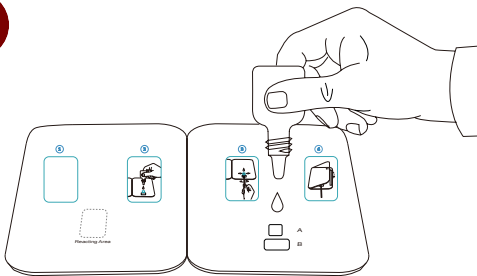

Geben Sie 6 Tropfen in die Vertiefung A.

4.

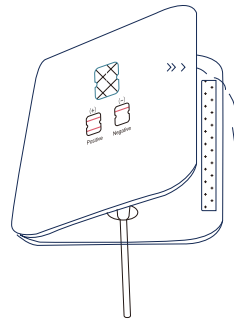

Ziehen Sie den Kleber ab, falten Sie die linke Seite um und warten Sie 15 Minuten.


Positiv

(+)




Negativ

(-)

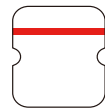

Ungültig

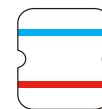

## Anwendungsvideos



<https://youtu.be/gIBzz9YCgCQ>

# JETZT VERFÜGBAR

## SICHERN SIE SICH IHRE SCHNELLTESTS

### SARS-COV-2 ANTIGEN SCHNELLTEST

**PACKUNG = 25 TESTKARTEN, 25 STERILE ABSTRICHTUPFER, 25 AMPULLEN PUFFERLÖSUNG,  
BEDIENUNGSANLEITUNG**

Artikelnummer:	Mengeneinheit	Preis pro Packung €	Bestellmenge
<b>959348</b>	1 Packung (25 Stk.)	ab 148,75	

Alle Preise verstehen sich zzgl. der aktuellen MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angebot nur gültig, solange der Vorrat reicht.

**Bestellung** telefonisch unter **04131 22119 0** oder per E-Mail an **lueneburg@niemann-laes.de**.

Rechnungs-/Lieferanschrift:



#### Industriebedarf Niemann-Laes GmbH

##### Lüneburg

Tel.: 04131 22119 0

Mail: [lueneburg@niemann-laes.de](mailto:lueneburg@niemann-laes.de)

##### Bielefeld

Tel.: 0521 9863288 0

Mail: [bielefeld@niemann-laes.de](mailto:bielefeld@niemann-laes.de)

##### Rostock

Tel.: 0381 6609677 02

Mail: [rostock@niemann-laes.de](mailto:rostock@niemann-laes.de)



##### Kiel

Kaiser & Stuckert Industrie- und  
Baubedarf GmbH

Tel.: 0431 98139 0

Mail: [info@kaiser-stuckert.de](mailto:info@kaiser-stuckert.de)



##### Bremen

J.H. Jaeger & Eggers

Handelsgesellschaft mbH

Tel.: 0421 3998 0

Mail: [info@jaeger-eggerts.de](mailto:info@jaeger-eggerts.de)



##### Scharnebeck

INMO Industrie-Montagen GmbH

Krane-Service

Tel.: 04136 8292

Mail: [contact@inmo-krane.de](mailto:contact@inmo-krane.de)